




Komponenty křesla

A	Rukojeť pro přenášení	E	Dvojitá kola Ø10 cm
B	Opěradlo	F	Páka ovládání opěrky nohou
C	Loketní opěrka	G	Opěrka nohou
D	Sedadlo	H	Opěrka nohou

Opěradlo

Spuštění: Zatáhněte za knoflík na obou stranách křesla a současně stiskněte loketní opěrku.
Zvednutí: Znovu zatáhněte za knoflík a zároveň zvedněte loketní opěrku až na doraz.

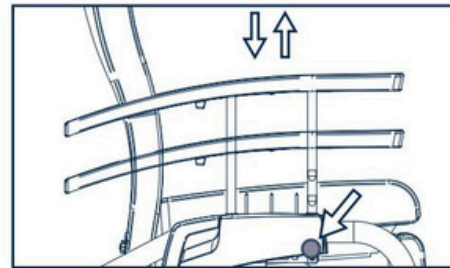


Zvedání loketní opěrky

Další funkce křesla

Kola a brzdový systém

Aktivace brzdy: zvedněte pedál do nejvyšší polohy (1).
Volný pohyb: přesuňte pedál do střední polohy (2).
Volant: sešlápněte pedál nohou do nejnižší polohy (3).

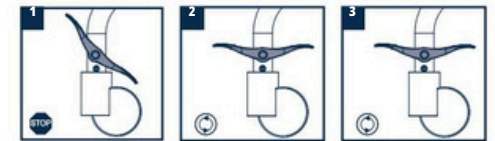

Individuální brzdový systém

Sešlápněte pedál do nejnižší polohy, po aktivaci brzdy se kolo zablokuje.
 Pro deaktivaci sešlápněte pedál nohou do nejvyšší polohy.



Čištění

Doporučuje se čistit jednotku čistícím prostředkem a teplou vodou. Nepoužívejte nadměrné množství tekutých ani abrazivních čistících prostředků.

Denní čištění a dezinfekce

Opěradlo, sedák, opěrka nohou, loketní opěrka a madlo.

Čištění a dezinfekce po odchodu pacienta nebo před převozem:

Opěradlo, sedák, opěrka nohou, loketní opěrka, madlo, opěrka nohou, ovládací páky.

Důkladné čištění a dezinfekce každé dva měsíce:

Celá židle.

Údržba

Vždy zkontrolujte správný stav:

Kola.
 Brzdové mechanismy.
 Mechanické komponenty pro pohon opěradla a opěrky nohou.




Mechanický provoz

Nastavení opěradla

Snížení opěradla: Zatáhněte za páku na levé straně sedadla a otočte ji, zatlačte opěradlo do požadované polohy a páku uvolněte.

Zvednutí opěradla: Znovu ručně zatáhněte nahoru a otočte pákou na levé straně sedadla a nechte sedadlo volně zvednout, aniž byste se o něj opírali nebo vyvíjeli jakoukoli sílu.

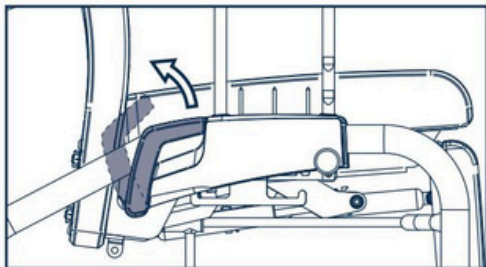


Páka nastavení opěradla

Nastavení opěrky nohou

Vysunutí: Posuňte páku na pravé straně sedadla dozadu a nechte opěrku nohou volně zvednout, dokud nedosáhne požadované polohy.

Zasunutí: Stiskněte páku na pravé straně sedadla a zatlačte opěrku nohou dolů, dokud se nespustí do původní polohy.

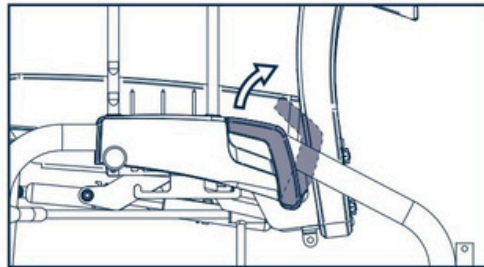


Páčka nastavení opěrky nohou



Spuštění opěradla



Zvedání opěradla

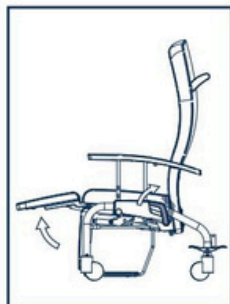

Prodloužení opěrky nohou



Zasunutí opěrky nohou

Příslušenství

Opěrka nohou

Pokud je verze židle se čtyřmi kolečkami, existuje možnost zabudování opěrky nohou.



Prodloužená opěrka nohou



Zasunutá opěrka nohou

Nastavení křesla

V závislosti na uživateli, pro kterého je křeslo určeno, zda se jedná o pacienta nebo doprovod, lze je konfigurovat s různými příslušenstvími:



Sentra FRC



Sentra FRI



Sentra DUO



Sentra RLX

Industrias Hidráulicas Pardo SL má následující certifikáty



BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Nesedějte si na opěradlo, abyste zabránili ztrátě stability židle nebo jejímu zlomení v důsledku nadváhy. Při zvedání nebo skládání manipulujte s nožní částí opěrky opatrně, abyste si nepohmoždili ruce.

Nesedějte si na loketní opěrku, abyste předešli ztrátě stability židle nebo jejímu zlomení v důsledku nadváhy.

Při zvedání nebo nabírání manipulujte s nožní částí opěrky opatrně, abyste si nepohmoždili ruce.

Pokud se křeslo nebo pacient nepřepřeváží, musí být aktivovány brzdy na všech kolech, protože by mohlo dojít k poškození při náhodném pohybu.

